

単品系装具

補助製品の収集



ストーマ装具、汚物処理袋、粘着剥離剤、洗浄用微温湯、ティッシュまたは不織布を用意します。必要時: ハサミ、ペン、ストーマゲージ、アクセサリ。

使用済みのストーマ装具の除去



皮膚をそっと押さえて面板から剥がしながら、接着剤の外縁部をゆっくりと持ち上げて下向きに剥がします。使用済みの装具を適切に処理します。トイレに流さないでください。

皮膚の洗浄および乾燥



医療専門家の推奨に従って、水または刺激の少ない石鹸を使用して皮膚を洗浄します。洗い流して水分を拭き取ります。皮膚にオイル、パウダー、ローションまたはローションタイプの石鹸を使用しないでください。


皮膚の状態の確認



ストーマ周囲の皮膚が、炎症、発疹、発赤がなく、無傷であることを確認します。*

*炎症、発疹、発赤がある場合は、医療従事者にご相談ください。


面板とストーマ袋の準備

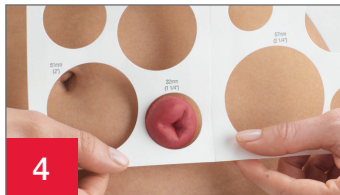

面板を貼付する前に、ストーマゲージを使用して、ストーマのサイズを測定します（プレカットタイプの面板を使用している場合は、ステップ 7 に進みます）。



保護剤の開口部の該当するサイズを面板にトレースします。面板は、皮膚とストーマが接している部分にフィットする必要があります。漏れや皮膚の炎症を防ぐために、面板とストーマの間に皮膚が見えていないことを確認します。

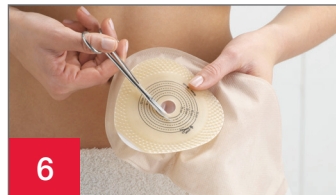

わん曲ハサミを使用して、パターンに合うように面板の開口部を注意深くカットします。剥離ライナーの線の外をカットしないでください。パウチに穴を開けないでください。



剥離紙を面板から剥がします。

用手成形皮膚保護剤の追加 (必要な場合)



該当する場合、使用説明書に従って、開口部の周囲に保護リングを貼り付けるか、薄いペーストを塗布します。

新しいストーマ装具の装着




面板の開口部とストーマの中心を合わせて置きます。



約 1 分間面板をそっと押さえて密着させます。



面板の周囲にテープが付いている場合は、両側の裏紙を剥がし、皮膚にテープ部分を沿わせませす。

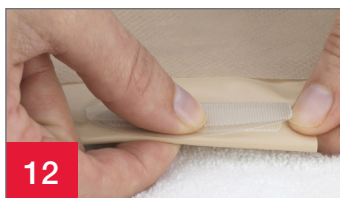

12

排出口を閉めます。排出型パウチを使用している場合は、パウチの下部にあるロックンロール マイクロシール クロージャーを閉じるか、ドレイン ストッパーを装着します。このクロージャー システムの使用の詳細については、「ロックンロール マイクロシール クロージャー ケアに関するヒント」を参照してください。



尿路用装具を使用している場合は、排出口が閉じられていることを確認します。排出口の涙の形がストーマ袋の身体側に向いている必要があります。

必要に応じて、同梱されているキャップを装着します。

単品系装具

ヒント	製品のリスト	製品番号
<ul style="list-style-type: none">ストーマ周囲の皮膚に、発疹やかぶれがないか確認する必要があります皮膚に炎症がある場合は、医療従事者にご相談ください用手成形皮膚保護剤やペーストを使用している場合は、医療従事者の指示に従い、ストーマ近接部や面板に追加します手術後、ストーマに浮腫がみられる場合があります。ストーマが一定のサイズに縮小するまでに、数週間または数か月かかる場合がありますストーマを洗浄する際、わずかに出血する場合があります皮膚保護ワイプを使用すると、装着期間が短くなる可能性があるため、長期の面板の装着ではお勧めしません	単品系装具	_____
	アクセサリ	
	用手成形皮膚保護剤	_____
	ストーマ ベルト	_____
	ペースト	_____
	消臭潤滑剤	_____
	ストーマパウダー	_____
その他 _____	_____	

その他の説明

米国での製品に関する質問、サンプリングのニーズ、または弊社製品に関する詳細な臨床上の質問については、**1.888.808.7456**までお問い合わせください。カナダの場合は、**1.800.263.7400**までお問い合わせください。

www.hollister.com

皮膚の水分を十分に拭き取ってから、面板を貼付してください。

使用する前に、使用目的、禁忌、警告、注意事項、および使用方法について使用説明書を必ずお読みください。

Hollister のロゴ、ロックンロール、および「健康な肌から、より良い毎日を支える。」は Hollister Incorporated の商標です。

© 2018 Hollister Incorporated. 923069-1118 US-00667